

# Freezer -30°C marca Indrel (Brasil)

## Especificaciones:

*Modelo: CLC 300 DAF*

*Dimensiones (cm): 170H x 60L x 85D*

*Rango de temperatura: -15°C a -35°C*

*Frío seco*

*Capacidad: 300 litros*


*Alimentación: 110/220V, 50/60Hz*

*Estantes/Cajones: 5 a 7*

## Características:

- ✔ Temperatura ajustable entre -15°C y -35°C, preseleccionado a -30°C, con el sensor en la solución de diatermia, lo que indica la temperatura exacta del producto almacenado.
- ✔ Cámara interna fabricada en acero inoxidable para la asepsia y limpieza perfecta, la seguridad del producto almacenado y la longevidad.
- ✔ Estructura externa construida en acero tratado químicamente y pintados con tinta especial antibacteriana.
- ✔ Sistema "roll-out" de los cajones con rieles de acero inoxidable o estantes ajustables.
- ✔ Aislamiento térmico en polímero de alta densidad libre de CFC con un espesor mínimo de 70mm.

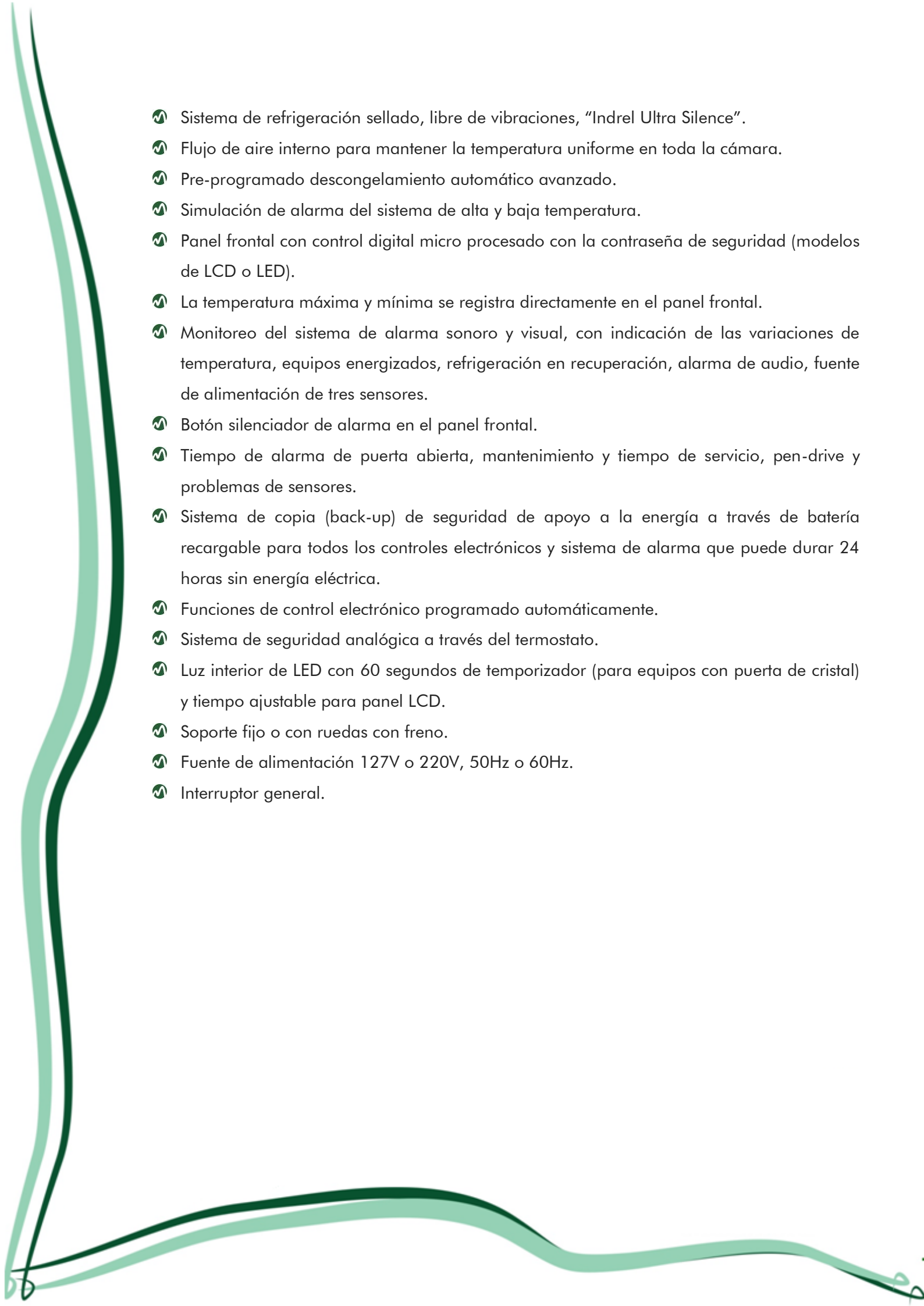

- 
- 🌀 Sistema de refrigeración sellado, libre de vibraciones, "Indrel Ultra Silence".
  - 🌀 Flujo de aire interno para mantener la temperatura uniforme en toda la cámara.
  - 🌀 Pre-programado descongelamiento automático avanzado.
  - 🌀 Simulación de alarma del sistema de alta y baja temperatura.
  - 🌀 Panel frontal con control digital micro procesado con la contraseña de seguridad (modelos de LCD o LED).
  - 🌀 La temperatura máxima y mínima se registra directamente en el panel frontal.
  - 🌀 Monitoreo del sistema de alarma sonoro y visual, con indicación de las variaciones de temperatura, equipos energizados, refrigeración en recuperación, alarma de audio, fuente de alimentación de tres sensores.
  - 🌀 Botón silenciador de alarma en el panel frontal.
  - 🌀 Tiempo de alarma de puerta abierta, mantenimiento y tiempo de servicio, pen-drive y problemas de sensores.
  - 🌀 Sistema de copia (back-up) de seguridad de apoyo a la energía a través de batería recargable para todos los controles electrónicos y sistema de alarma que puede durar 24 horas sin energía eléctrica.
  - 🌀 Funciones de control electrónico programado automáticamente.
  - 🌀 Sistema de seguridad analógica a través del termostato.
  - 🌀 Luz interior de LED con 60 segundos de temporizador (para equipos con puerta de cristal) y tiempo ajustable para panel LCD.
  - 🌀 Soporte fijo o con ruedas con freno.
  - 🌀 Fuente de alimentación 127V o 220V, 50Hz o 60Hz.
  - 🌀 Interruptor general.



# biosistemas

calidad total al servicio de la vida

Los freezers Indrel están disponibles en varios tamaños, con capacidades que varían desde 120 hasta 684 litros.

Todos los productos cumplen con los requerimientos establecidos por ANVISA, la Organización de Salud de Brasil, Organización Mundial de la Salud y las directivas AABB con certificaciones y registros. Además Indrel también está certificada con la ISO9001 sistema de calidad total, ISO 13485, marca CE y FDA.

Todos los equipos Indrel disponen de la más alta tecnología en refrigeración médica, de laboratorio y científico, con un control uniforme y rápida recuperación de la temperatura.

**Modelos horizontales:** CPH 35D, CPH 45D

**Modelos verticales:** CPS 10D, CLC 300DAF, CLC 504D, RVV 880D, CV54D, CV 54D-2



**Biosistemas**

Ana Monterroso de Lavalleja 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

[www.biosistemas.com.uy](http://www.biosistemas.com.uy)

